

## CONSEILS D'UTILISATION

### KAP&GO est livré avec :

- Son câble USB
- Son capot
- Sa batterie
- Son stylet
- Cette notice rapide

### Fonctionnement de KAP&GO :

- Cette notice décrit l'installation du lecteur. Pour son paramétrage dans le logiciel métier, demander conseil à votre éditeur.
- La notice détaillée est disponible sur [www.kapelse.com](http://www.kapelse.com) ou chez votre éditeur.
- N'insérer que des cartes à puce dans les interfaces cartes.
- Utiliser spécifiquement le câble de KAP&GO proposé dans la boîte.


### Pour l'entretien de KAP&GO :

- Utiliser un chiffon doux et sec pour le nettoyage de l'écran et du lecteur. N'utiliser aucun produit de nettoyage.
- Ne pas utiliser l'écran tactile avec un objet pointu.

MADE IN FRANCE CE RoHS

Pour la mise en marche de KAP&GO, il faut :

1- Insérer la batterie comme indiqué ci-dessous : le logo de la batterie doit apparaître inversé par rapport au logo du lecteur :

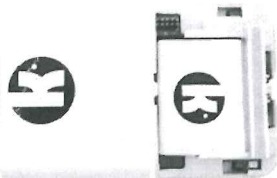


2- Insérer complètement la carte C.P.S. (Carte de Professionnel de Santé) au dos du lecteur. Le dos de la carte est orienté vers le dos du lecteur :



## INSTALLATION

3- Refermer le capot en le faisant glisser de bas en haut :

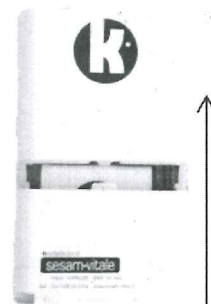

4- Insérer le stylet à son emplacement, au bas du capot\*.

5- Connecter KAP&GO au poste de travail grâce au câble USB fourni dans la boîte pour :

- charger la batterie
- remonter le pilote (cf. INITIALISATION) sur le poste de travail
- identifier le lecteur avec le logiciel métier (cf. notice logiciel).


(\*) : il est nécessaire de retirer le stylet pour pouvoir ouvrir ou fermer le capot.

## INITIALISATION

### 1- Installation du pilote de KAP&GO :

Le pilote de KAP&GO est disponible sur Windows Update ou depuis le lecteur KAP&GO lui-même. Pour le remonter depuis le lecteur connecté : appuyer sur la touche  puis LINK et INSTALLATION PILOTE et suivre les instructions sur le PC.

### 2- Réglages de KAP&GO :

- L'ensemble des réglages et paramètres est accessible par l'appui sur la touche  proposée dans le bandeau au bas de l'écran. Le détail des fonctionnalités est disponible dans la notice détaillée.

## GÉNÉRALITÉS

KAP&GO, dans sa version Pro, est une solution intégrant les fonctionnalités d'un T.L.A. réduit. Il permet l'enregistrement des feuilles de soins créés sur le poste de travail et leur signature totale ou partielle en déplacement. Il permet aussi l'enregistrement des données de la carte Vitale en déplacement. Les données acquises en déplacement peuvent être, ensuite, déchargées dans le poste de travail, de retour au cabinet.

## EN MODE DÉCONNECTÉ

En mode déconnecté, saisir l'entête FSE et vérifier que KAP&GO est identifié par le logiciel\*. Le menu, proposé ensuite, permet d'accéder aux informations stockées dans le lecteur.



En mode déconnecté, KAP&GO passe automatiquement en mode veille au bout d'1 minute d'inactivité. Il sort de de veille par insertion d'une carte, un appui court sur le bouton ou une connexion sur le poste de travail. Appuyer sur le bouton « Déverrouiller » si nécessaire.

KAP&GO s'éteint automatiquement au bout de 3 heures d'inactivité. Faire un appui long sur le bouton pour le rallumer puis appuyer sur le bouton « Déverrouiller ».

Pour éteindre ou mettre en veille KAP&GO de manière volontaire, faire un appui long sur le bouton et faire votre choix dans l'écran suivant :



(\*) : pour toute information complémentaire, contacter votre éditeur